


КОРАК 4 – Пошаљите узорке


1. Попуните формулар Participant Details form.



2. На полеђину коверте са плаћеном поштарином напишите ваше име и адресу и потпишите се на предњем делу коверте.

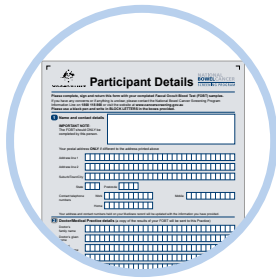

3. Формулар и две епрувете са узорцима (које се налазе у врећици која је затворена патент затварачем) ставите у коверту са плаћеном поштарином и затворите коверту.

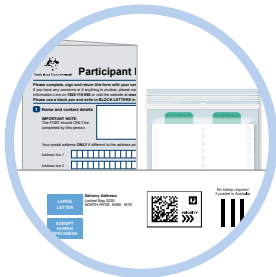

4. Однесите коверту на пошту у року од 24 сата или је пошаљите касно после подне (пре 6 сати увече) тако што ћете је убацити у поштанско сандуче аустралијске поште.



Узорци морају да буду хладни, зато немојте да их оставите на врућем месту као што је аутомобил.

? Питања

Ако имате питања о томе како треба да обавите тест, позовите дежурну службу на **1800 930 998** (од понедељка до петка, од 7.30 ујутро до 10 увече а суботом и недељом од 9 ујутро до 7 увече по источном и централном стандардном времену - AEST/AEDT) или погледајте кратак видео на www.cancerscreening.gov.au/bowel



Преводи

За информације на вашем језику погледајте www.cancerscreening.gov.au/translations или позовите Службу преводилаца и тумача (Translating and Interpreting Service) на 13 14 50.



Резултат теста

Резултат теста ће бити послат и вама и вашем лекару (ако сте га навели) неколико недеља након слања узорака.



Australian Government

**NATIONAL
BOWELCANCER**

SCREENING PROGRAM

Комплет за обављање теста код куће Упутства

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ПРЕТРАГЕ



**SONIC
HEALTHCARE**
Quality is in our DNA

СПОНЗОР

r-biopharm



34 WOODFIELD BOULEVARD CARINGBAH NSW 2229

ПРОИЗВОЂАЧ



EIKEN CHEMICAL CO., LTD.

www.cancerscreening.gov.au

4 лака корака
која могу да вам
спасу живот.

Дежурна служба **1800 930 998**

www.cancerscreening.gov.au

Упутства

Комплет садржи



Пре него што почнете

Шта треба да знате

- ✓ Није потребно да мењате било шта у исхрани или по питању лекова.
- ✓ Треба да узмете два врло мала узорка из две посебне столице (измета) – по један узорак из обе столице. Узорке треба да узмете у што мањем временском размаку.
- ✓ Узорак/е чувајте на температури од 2°C до 8°C (идеално би било у фрижидеру али НЕ у замрзивачу) док их не пошаљете.

НЕМОЈТЕ да радите тест ако имате:

- ✗ Шуљеве (хемороиде) који крваре. Ако се то догоди, идите код лекара.
- ✗ Крв у мокраћи, столицу или у WC шољу. Ако се то догоди, идите код лекара.
- ✗ Менструацију. Сачекајте најмање три дана од престанка менструације пре него што приступите обављању теста.

КОРАК 1 – Припрема

1. На једну од налепница за епрувету напишите

- ваше пуно име и презиме поред слова [N]
- ваш датум рођења поред слова [A]
- датум узимања узорка поред слова [D]

2. Пре узимања узорка испразните бешику (измокрите се) и пустите воду.

3. Непромочиви лист поставите преко воде у WC шољу.

Страна са текстом треба да буде окренута на горе.

4. Ако непромочиви лист потоне можете да наставите са узимањем узорка или да затражите нови комплет.

КОРАК 2 – Узимање узорка

1. Испразните црева на непромочиви лист.

2. Отворите епрувету за узорак тако што ћете одврнути зелени поклопац.

3. Загребите врхом штапића преко површине на различитим деловима столице.

Узорак треба да буде јако мали – мањи од зрна пиринча.

4. Штапић вратите у епрувету и притисните поклопац да је затворите.

Протресите епрувету горе-доле неколико пута. Штапић више немојте да вадите.

5. Пустите воду тако да непромочиви лист и столица оду. Оперите руке.

КОРАК 3 – Сачувајте узорак и поновите поступак

1. Епрувету ставите у врећницу са патент затварачем.

2. Ставите узорак у фрижидер. (Немојте га замрзавати).

3. Поновите кораке од 1 до 3 користећи другу епрувету за узимање узорка када поново budete имали столицу (истог дана, следећег дана или што пре након узимања првог узорка).

Окрените лист за 4. корак.

“ Иако тест може да вам се не допада, његово обављање је чисто, лако и може да вам спасе живот. Потребно је да одете у тоалет само два пута а затим да пошаљете узорке и тиме сте све завршили. ”