



Australian Government

NATIONAL BOWELCANCER SCREENING PROGRAM

Naam van het product

Nationale Darmkanker
Screeningprogramma

Pathologische dienst



Stuur uw Blauwe Verzendenveloppe,
met uw monsters, naar:

Reply Paid 83974
Dorevitch Pathology
FOBT Department
PO Box 5018
Heidelberg West MDC VIC 3081

Sponsor van

NEW HEMTUBE (B)

SIEMENS

Fabrikant van

NEW HEMTUBE (B)

FUJIREBIO INC.

FOBT002 Version 12/12

NATIONAL BOWELCANCER SCREENING PROGRAM



Australian Government

HET BEWAREN VAN UW MONSTERS

- ▶ Bewaar de blauwe Verzendenveloppe met uw monsters bij een temperatuur tussen de 2° en 10°C – de koelkast is de beste plaats voor uw monsters.

Wat u niet moet doen:

- ▶ Uw dieet of medicatie veranderen.
- ▶ Uw monsters invriezen.

Neem geen monsters af als:

- ▶ U aambeien heeft die bloeden.
- ▶ Tijdens de menstruatie of binnen 3 dagen daarvoor of daarna.
- ▶ U bloed in uw urine hebt of in de toiletpot – in dit geval moet u uw huisarts raadplegen.
- ▶ U binnenkort een afspraak heeft voor een colonoscopie.
- ▶ U in de laatste 12 maanden darmklachten hebt gehad die momenteel in behandeling zijn – als u niet zeker bent, raadpleeg uw arts.

Hoe u monsters moet afnemen voor de test >>>

Lees de volledige brochure voordat u de twee monsters in 4 gemakkelijke stappen afneemt.

Snel en gemakkelijk, in uw eigen huis wanneer het u het best uitkomt.

Hebt u hulp nodig?

Bel 1800 738 365 maandag - vrijdag tussen 9 am en 5 pm.


Moeite met het lezen van Engels?

Bel ons op 13 14 50

Het afnemen van uw eerste monster

1

- ▶ Gebruik de **BLAUWE SPATEL**.
- ▶ Ledig uw blaas, spoel dan het toilet.
- ▶ Laat het Opvangvel met de gedrukte tekst naar boven in de toiletput drijven.
- ▶ Ga op de bril zitten en doe een hoop op het opvangvel.
- ▶ Het opvangvel veroorzaakt bij het doorspoelen geen enkel probleem bij welk toilet dan ook.
- ▶ Duw het uiteinde van de **BLAUWE SPATEL** in uw ontlasting en beweeg die heen en weer totdat er **niet meer** dan de grootte van een rijstkorrel op het uiteinde van de spatel zit.

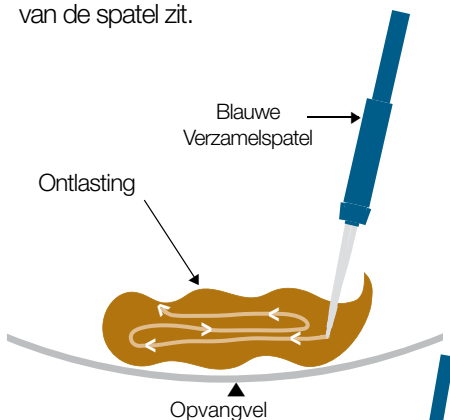

- ▶ Duw de **BLAUWE SPATEL** helemaal in het Opvangbuisje totdat dit zich met een klik sluit.


Maakt u zich niet ongerust als het lijkt dat er nauwelijks ontlasting in de vloeistof van het Opvangbuisje zit.

- ▶ **BELANGRIJK** > Verwijder de **BLAUWE SPATEL** niet nadat u deze in het Opvangbuisje geduwd hebt.

Het aanbrengen van het label en het bewaren van het monster

2

- ▶ Schrijf uw 'Naam', 'Geboortedatum' en de 'datum van het nemen van het monster' in drukletters op het label en plak het rond het Opvangbuisje.
- ▶ Doe het Opvangbuisje in de Verzendbuis met schroefsluiting.

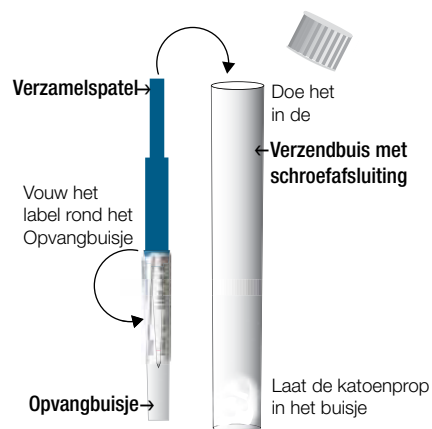


Breng het label aan op het Opvangbuisje en **NIE**T op de Verzendbuis

- ▶ Breng de schroefdop aan en doe het in de afsluitbare zak. Sluit deze af.
- ▶ Doe de afgesloten zak in de blauwe Verzendenvelophe.
- ▶ **BELANGRIJK** > Bewaar de blauwe Verzendenvelophe bij een temperatuur tussen de 2° en 10°C – de koelkast is een goede plaats.
- ▶ **BELANGRIJK** > Niet invriezen.

Het afnemen van het tweede monster

3

- ▶ Gebruik de **RODE SPATEL**.
- ▶ Het tweede monster moet bij voorkeur binnen 2-3 dagen afgenomen worden. U kunt desgewenst het tweede monster ook later op dezelfde dag afnemen.
- ▶ Herhaal alle stappen op dezelfde manier als in "1. Het afnemen van het eerste monster" en "2. Het aanbrengen van het label en het bewaren van het monster".
- ▶ Plaats de Verzendbuis samen met de andere buis in de afsluitbare zak en doe deze dan in de Verzendenvelophe.

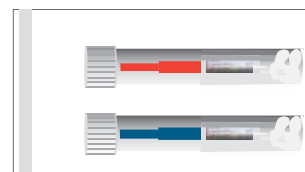

- ▶ **BELANGRIJK** > Bewaar de Enveloppe, voordat u deze wegstuurt, op een plaats waar de temperatuur tussen de 2° en 10°C ligt.
- ▶ **BELANGRIJK** > Niet invriezen.

Checklist voor verzending

4

- ▶ Zet uw handtekening in het daarvoor bestemde vlak op de voorzijde van de blauwe Verzendenvelophe.
- ▶ Vul op de achterkant van de blauwe Verzendenvelophe de "Naam van de afzender" en "het adres van de afzender" in.
Doe deze in de blauwe voorgefrankeerde Verzendenvelophe:
- ▶ **BELANGRIJK** > Onderteken en dateer het **Formulier Bijzonderheden van de Deelnemer**, dat u aantreft in de grote enveloppe waarin het testpakket toegestuurd werd.
- ▶ Sluit de zak af waarin de twee gelabelde Opvangbuisjes die zich in de Verzendbuis met schroefdopafsluiting bevinden.
- ▶ Stuur de voltooide test zo snel mogelijk terug.
- ▶ Onderweg naar het postkantoor, houdt de Verzendenvelophe droog en koel (onder de 25°C).
Verstuur de blauwe Verzendenvelophe via een postkantoor/agentschap van Australia Post.
Als dat niet kan doe hem dan in een brievenbus van Australia Post.